


LES NOUVEAUTÉS 2012

découvrez toutes les nouveautés PAGES II à XII



PARFAITE
PRISE
EN MAIN

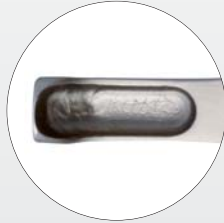

Plus de détails
P. 872

Bone scraper suivant Dr Guillaume KOHLER

Bone scraper avec manche massif.

50.120	Le bone scraper	161,50 €
--------	-----------------	----------


LES NOUVEAUTÉS 2012

Plus de détails

P. 867



SEGMENTS
CLIPSABLES

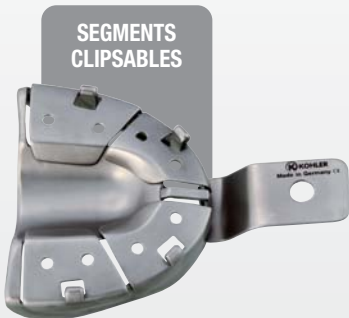

Wintray® Nouvelle génération KOHLER

Porte-empreintes pour implantologie.

Indications: Prise d'empreinte avec le positionnement d'implant unitaire ou multiple à l'arcade supérieure ou inférieure.

Propriétés: Le concept de porte-empreintes Wintray facilite la prise d'empreinte tout en assurant une stabilité des piliers dans le matériau d'empreinte • Les segments (réduits au nombre de 4) de la Wintray® Nouvelle génération se décliquent facilement du porte empreinte • Il n'y a plus ni vis ni tournevis • Fabriqué en acier inoxydable • Stérilisable.

Haut

5.050	Small	5.052	Large
5.051	Medium		
Le porte-empreintes			199,70 €

Bas

5.053	Small	5.055	Large
5.054	Medium		
Le porte-empreintes			199,70 €

Plus de détails

P. 742

BONNE
RÉSISTANCE AU
DÉCOLLEMENT



photo

Fuji Ortho LC PP Automix GC

1 cartouche de pâte de 13,3 g • 2 seringues de GC Ortho Gel Conditioner de 1,4 g • 20 embouts de mélange • 15 pinceaux applicateurs

77.350 Le coffret **287,00 €**

Réassort

2 cartouches de 13,3 g

77.351 La boîte **299,00 €**

20 embouts de mélange

77.354 La boîte **52,20 €**

Fuji Ortho Gel Conditioner

3 seringues de 1,4 g et 25 pinceaux applicateurs

77.352 La boîte **86,00 €**

Fuji Ortho Band GC

Pâte/pâte.

Propriétés: Epaisseur de film de seulement 3 microns • Retrait aisé pendant l'application et au moment de la dépose.

Couleur ■ Bleu

2 cartouches de pâte/pâte de 13,3 g • 1 bloc de mélange

77.353 Le coffret photopolymérisable **183,00 €**

LES NOUVEAUTÉS 2012

Plus de détails

P. 787

Opalescence® Oh! ULTRADENT

Blanchiment à domicile.

Indications: Blanchiment pour dents vitales et non-vitales.

Propriétés: Opalescence Oh! a les mêmes caractéristiques que la formule d'Opalescence PF en seringue, mais avec une dose unique prête à être délivrée • Dose unique préchargée, dosée pour une arcade/gouttière individualisée.

16 unidoses de 0,6 ml • 1 tube de 25 ml (32,03 g) d'Opalescence Whitening dentifrice • 1 Pocket Tray Case • 1 teintier

Le kit voir références ci-dessous **76,00 €**

Référence	Goût	Concentration
23.920	Neutre	10%
23.921		15%
23.922		20%
23.923		35%



DOSE POUR
UNE ARCADE



Neutre



Menthe



Pastèque



Commandez sur www.promodentaire.com





Plus de détails

P. 341

NOUVEAU
REVÊTEMENT

Contre-angles EXPERTmatic KAVO

Propriétés: Nouvelle forme et nouveau revêtement Kavo EXPERTgrip • Système de serrage par bouton-poussoir renforcé • Refroidissement optimal de la fraise grâce à l'amenée séparée d'air et d'eau de spray • Barre conductrice de lumière de 25000 Lux.

Garantie 18 mois

E15 - Réducteur 5:1

Couleur Vert

244.631 E15L avec lumière, l'unité **1119,50 €**

E20 - 1:1

Couleur Bleu

244.633 E20L avec lumière, l'unité **1009,50 €**

E25 - Multiplicateur 1.5

Couleur Rouge

244.635 E25L avec lumière, l'unité **1375,00 €**



Plus de détails

P. 359

TÊTE PLUS
PETITE

EXPERTtorque Kavo

Propriétés: Sans vibrations • Couplé élevé • Plus petite tête en acier pour une meilleure résistance • Clapet de régulation automatique • Microfiltre échangeable • Nouveau revêtement Kavo EXPERTgrip.

Vitesse de rotation maxi 380 000 tr/min

Autoclavable à 134°C

Garantie 18 mois

Sans lumière

E680 C

244.463 L'unité **1095,00 €**

Avec lumière

E680 L

244.464 L'unité **1243,00 €**

E677 L Turbine mini-version avec 3 spray

244.466 L'unité **1207,00 €**

LES NOUVEAUTÉS 2012



SE NETTOIE
INTÉGRALEMENT

Plus de détails

P. 372

Air-N-Go SATELEC

Aéropolisseur à double fonction: fonction Supra et Perio • Avec la buse Perio, en quelques secondes, le polisseur se transforme en un outil extrêmement performant de traitement des parodontites et péri-implantites.

Autoclavable 134°C

Garantie 1 an

Polisseur et adaptateur cordon turbine • 1 nez hygiéniste court • 1 nez long • 1 buse Supra (120°) • 1 réservoir Supra • Sachets monodose • 1 flacon menthe poivrée "Classic"

244.315 Pour adaptateur Kavo

244.316 Pour adaptateur Sirona

244.317 Pour adaptateur W&H

244.318 Pour adaptateur Bien Air

244.319 Pour adaptateur NSK

Le kit **1316,00 €**

UN SEUL PRODUIT
POUR TOUTES
LES SURFACES

Plus de détails

P. 408



1. photo



2. photo

OptiBond™ XTR KERR

Système adhésif automordançant bicomposant (SAM2), photopolymérisable.

Indications: Pour toutes les restaurations directes et indirectes.

Propriétés: Des valeurs d'adhésion comparables à celles des systèmes adhésifs en mordançage total • Protocole largement simplifié, un seul produit pour toutes les surfaces (dentine, émail, céramique, Zircone, Métal, Alumine).

Flacon

1 flacon de Primer (5 ml) • 1 flacon d'adhésif (5 ml)
• 2 x 50 applicateurs • 25 godets de mélange • 1 guide technique • 1 mode d'emploi

38.746 **1** Le kit flacon **233,20 €**

Unidoses

50 unidoses de Primer (0,18 ml chacun) • 50 unidoses d'adhésif (0,18 ml chacun) • 2 x 50 applicateurs
• 1 guide technique • 1 mode d'emploi

38.745 **2** Le kit Unidoses **275,10 €**

LES NOUVEAUTÉS 2012

Plus de détails

P. 424

UNE COUCHE,
UNE OBTURATION,
UN MATÉRIAU



Tetric EvoCeram Bulk Fill

IVOCLAR VIVADENT

Nouveau composite direct pour les zones postérieures, qui permet d'obturer une cavité d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à 4 mm.

Propriétés: Basé sur la même composition chimique que le composite Tetric EvoCeram • Une couche, une obturation, un matériau • Une stratification par couche n'est pas nécessaire avec Tetric EvoCeram Bulk Fill • Sa mise en œuvre, efficace et facile, consiste à mettre le composite en place en une seule couche, pouvant aller jusqu'à 4 mm d'épaisseur • Aucun composite supplémentaire n'est nécessaire pour créer une couche de recouvrement dans la zone émail.

Seringue de 3 g

39.522	A	39.524	White
39.523	B		
La seringue			50,70 €

3 seringues de 3 g

39.525	A	39.527	White
39.526	B		
La boîte			144,10 €

20 Cavifils de 0,2 g

39.528	A	39.530	White
39.529	B		
La boîte			74,20 €



Commandez sur www.promodentaire.com



UN SEUL INCRÉMENT
JUSQU'À 4 MM

Plus de détails

P. 416



SDR™ DENTSPLY

Composite souple de substitution dentinaire.

Indications: Base pour la restauration directe des cavités de classes I & II • Fond de cavité sous les matériaux de restauration directe • Fond de cavité en classe II.

Propriétés: Mise en place en volume par incrément de 4 mm • Etalement spontané - plus de modelage • Excellente adaptation aux parois cavitaires • Etanchéité et intégrité marginale respectée grâce à la technologie SDR • Economie de temps • Facilité de manipulation • Pas de sensibilité post-opératoire • Compatible avec tous les adhésifs et composites du marché à base de résine • Protocole simplifié. Photopolymérisation 20 s

45 Compula® Tips de 0,25 g teinte Universelle • 1 boîte de rangement SDR™ • 1 flacon de Xeno® V 2,5 ml • 1 godet CliXdish™ • 1 pistolet à Compula®

38.601 Le kit intro **190,20 €**

LES NOUVEAUTÉS 2012

ADAPTATION PARFAITE
PAS DE STRATIFICATION



1.

2.

photo

SonicFill KERR/KAVO

Indications: Restaurations postérieures.

Propriétés: Le système SonicFill se compose d'une pièce spécialement fabriqué par Kerr et présenté en unidoses • Le processus, breveté, d'activation par SonicFill, réduit significativement la viscosité du composite pour permettre l'obturation rapide de la cavité • Dès l'arrêt de la vibration par la pièce à main, le composite revient à sa viscosité initiale et se sculpte facilement • Une profondeur de polymérisation allant jusqu'à 5 mm permet de combler en une seule fois les cavités de carie • Adaptation parfaite aux parois de la cavité grâce à la vibration sonore et au changement de viscosité du composite • Faible taux de rétraction du composite et réduction des contraintes de polymérisation.

Plus de détails

P. 424

SonicFill System

1 pièce à main SonicFill • 1 kit de démarrage
5 unidoses et 5 modèles • 10 unidoses de 0,3 g A1
• 20 unidoses de 0,3 g A2 • 30 unidoses de 0,3 g A3
• 1 DVD guide de mise en œuvre

39.210 **1** Le kit d'introduction **1112,00 €**

Unidoses

39.213	A1	39.215	A3
39.214	A2	39.216	B1

2 La boîte de 20 unidoses de 0,3 g **113,60 €**

Accessoire

39.212 La pièce à main **932,90 €**

JUSQU'À 4 MM
D'ÉPAISSEUR DE
POLYMÉRISATION



Venus Bulk Fill HERAEUS

Composite de viscosité fluide à faible rétraction destiné à la réalisation de sous-couches épaisses pour des restaurations esthétiques en secteur postérieur.

Propriétés: Une auto-adaptation idéale pour le recouvrement du plancher et des parois de la cavité

- Une faible contrainte de rétraction • Jusqu'à 4 mm d'épaisseur de polymérisation
- Une radio-opacité élevée
- Une technique de mise en place facile, en un minimum d'étapes
- Compatible avec tous les composites et les adhésifs usuels.

Plus de détails

P. 420

Seringue

39.492	La seringue de 1,8 g	27,50 €
--------	----------------------	---------

PLT

39.493	Les 10 PLT de 0,2 g	43,00 €
--------	---------------------	---------

LES NOUVEAUTÉS 2012

MULTIPLES
INDICATIONS

photo



Plus de détails

P. 423

G-aenial Universal Flo GC

Composite fluide radio-opaque.

Indications: Pour toute les cavités de classe I, II, III, IV et V • Cavité a minima • Fixation de dents mobiles (barre de contention).

Propriétés: Viscosité fluide, pour un placement rapide et pratique et une polissabilité inégalée, rapide et simple • Des propriétés physiques exceptionnelles - au même niveau que celles d'un composite de restauration classique • Sans Hema, sans Bisphénol A • G-aenial Universal Flo existe en 15 teintes et 3 différents niveaux de translucidité • En seringue ergonomique avec un embout spécial pour une application simplifiée et moins de gaspillage.

Seringue de 3,4 g (2 ml)

39.186	A1	38.194	C3
39.187	A2	38.195	OA2
39.188	A3	38.196	OA3
38.189	A3.5	38.197	BW
38.190	A4	38.198	CV
38.191	B1	38.199	JE
38.192	B2	38.208	AE
38.193	B3		

La seringue **65,95 €**

Accessoire

39.209	Le sachet de 15 embouts Type III	17,80 €
--------	----------------------------------	---------



Commandez sur www.promodentaire.com



PRÉVIENT
L'APPARITION DE
MICRO-FRACTURES

Plus de détails
P. 457



Plus de détails
P. 483

auto

Chemfil™ Rock™ DENTSPLY

Verre ionomère de restauration renforcé au zinc.

Indications: Conçu spécifiquement pour les restaurations semi-permanentes de classe I et II en postérieur • Indiqué aussi pour: Restaurations de dents lactéales, des classes V et III, Reconstitutions corono-radicales.

Propriétés: Préviene l'apparition de micro-fractures durant la phase de prise, assure une longévité supérieure aux restaurations en verre ionomère. • ChemFil Rock est le seul verre ionomère renforcé au zinc qui offre une résistance mécanique élevée à la fracture dès la première heure de mise en place.

40 capsules teintées A1, A2, A3, Blanc de contraste (10 capsules de chaque) • 1 pistolet applicateur

72.488 Le kit intro **149,90 €**



Kit de démarrage digue Hygenic

Tout pour poser la digue.

36 digues latex moyennes vertes • 1 guide de marquage
• 1 cadre à digue en U plastique • 4 crampons Fiesta à ailettes (N° 2, 9, 12A, 13A) • 1 pince à perforer la digue
• 1 pince à crampon • 1 wedjet moyen jaune (latex)

38.869 Le kit **178,00 €**

LES NOUVEAUTÉS 2012

Plus de détails
P. 451



FACETTES
PRÉFABRIQUÉES

Compeer COLTÈNE WHALEDENT

Nouveau système de facettes en composite en méthode directe.

39.656	Synergy D6 en seringues	
39.655	Synergy D6 en tips	
	Le kit	1554,00 €

Set supérieur

1 Compeer de chaque taille 11, 12, 13, 21, 22, 23		
39.657	Médium émail universel	
39.658	Large émail universel	
	Le set	273,00 €

Réassort

2 Compeer supérieurs

Email universel			
39.659	Médium N° 11	39.663	Large N° 11
39.660	Médium N° 12	39.664	Large N° 12
39.661	Médium N° 21	39.665	Large N° 21
39.662	Médium N° 22	39.666	Large N° 22
	La boîte		96,00 €



TRÈS LÉGÈRE

Bluephase style IVOCLEAR VIVADENT

Propriétés: Légère: 180 grammes • Large spectre d'émission (385 à 515 nm) • Utilisation sur batterie ou sur secteur • Intensité stable et garantie de 1100 mW/cm² • Longue fibre optique pour un parfait accès au secteur postérieur.

Longueur d'ondes 385 à 515 nm
 Intensité lumineuse 1 100 mW/cm²
 Garantie 3 ans

37.335 La lampe **1194,20 €**

LES NOUVEAUTÉS 2012

FenderPrime DIRECTA

Propriétés: Combinaison d'une protection en acier et d'une matrice sectionnelle, permettent une restauration sûre, simple et rapide des dents temporaires • Jeunes patients et praticiens apprécient • Grand confort d'utilisation et gain de temps.

18 pièces

39.363	■ Jaune fluo	Court
39.364	■ Vert fluo	Long
La boîte		25,70 €

Assortiment de 36 pièces

39.362	La boîte	46,00 €
--------	----------	----------------

FenderPrep DIRECTA

Propriétés: Le FenderPrep, combinaison d'un coin et d'une protection en acier, évite d'endommager la dent adjacente et la papille gingivale lors des préparations majeures telles que couronnes, facettes et inlays • Grand confort d'utilisation et gain de temps.

Couleur ■ Gris

39.365	La boîte de 36 pièces	46,00 €
--------	-----------------------	----------------

Plus de détails

P. 490



Commandez sur www.promodentaire.com



Plus de détails
P. 577



BASÉE SUR LA TECHNOLOGIE
DE LA RÉCIPROCITÉ



Reciproc VDW

La technologie de la réciprocité, basée sur un mouvement unique (le mouvement de réciprocité), un alliage exclusif (le Mwire® nickel titane) et un design instrumental spécifique, vous permet de réaliser en toute sécurité et en toute simplicité, une mise en forme canalaire de qualité, à l'aide d'un seul instrument • Avec RECIPROC®, ressentez la puissance de la réciprocité pour des traitements endodontiques efficaces et simples • Design instrumental spécifique avec deux angles de coupe très actifs • Puissance de coupe pour éliminer rapidement les tissus minéraux et organiques • Progression aisée même dans les canaux très fins et courbes • Instruments stériles et à usage unique, conditionnés sous blisters • Gain de temps en éliminant deux étapes de travail: le nettoyage et la stérilisation des instruments.

62.670 Le kit intro

1885,00 €

LES NOUVEAUTÉS 2012

Plus de détails
P. 569



CONTRÔLE
LA MÉMOIRE
DE FORME

Introkit Procedure Block

2 séquences 21 mm • 4 séquences 25 mm • 60 pointes de Gutta Taper 0,04 • accessoires

62.661 Le pack

478,00 €

Sequence

5 limes: 04/20, 04/25, 04/30, 04/40, 06/20
• 1 lime 08/25 (L = 19 mm)

62.645 L = 21 mm

62.660 L = 25 mm

Le pack

71,00 €

HyFlex CM COLTÈNE ENDO

Limes NiTi.

Propriétés: Les limes HyFlex™ Controlled Memory NiTi sont fabriquées selon un processus unique qui permet de contrôler la mémoire de forme du matériau: elles offrent une flexibilité extrême • S'adapte parfaitement à l'anatomie du canal, réduisant le risque de butée, de transport canalaire ou de perforation radiculaire • Les limes répondent à la résistance excessive par un allongement des spirales, ce qui empêche la lime de trop engager dans les parois canalaires et augmente par conséquent leur résistance à la rupture • Il est possible d'annuler rapidement cette adaptation de la forme avec un traitement par la chaleur (pendant l'autoclavage ou à l'aide d'un stérilisateur à billes de verre) pour permettre aux instruments de retrouver leur forme initiale • En outre, ce processus renforce les limes et les rend beaucoup plus résistantes à la fatigue cyclique • Il permet également d'effectuer un contrôle visuel sans équivoque de l'instrument afin de vérifier s'il peut être réutilisé en toute sécurité • Jusqu'à 300% plus résistantes à la fatigue cyclique que les limes NiTi conventionnelles • Les limes HyFlex™ CM NiTi peuvent être utilisées avec la technique du "Crown-down", du "Step-back", ou bien celle appelée "Single length", que nous recommandons.

EXA'lence GC

La nouvelle génération de matériau d'empreinte: le Vinyl PolyEther Silicone (VPES™).

Propriétés: L'hydrophilie et la mouillabilité inhérentes de l'EXA'lence permettent, même en milieu humide, de capturer les détails les plus fins de la dent ● Reste hydrophile après la prise pour une précision plus élevée lors de la coulée du modèle ● Une résistance élevée au déchirement qui élimine le risque de dommage lors de la désinsertion et lors du retrait du modèle de l'empreinte ● Un long temps de travail et un temps de prise court ● Un agréable goût de menthe pour le patient ● Lisibilité des couleurs entre les différentes viscosités ● Temps de travail 2 min pour prise normale et 1 min pour prise rapide ● temps de prise en bouche 3 min pour prise normale et 1 min 30 s pour prise rapide.

Kit Putty

1 Standard Pack Putty ● 1 cartouche de 48 ml Light Body
● 1 cartouche de 48 ml Extra Light Body
● 12 embouts mélangeurs ● 12 embouts intra-oral
● 1 flacon d'adhésif

940 Le kit **169,00 €**

Putty

Couleur..... Beige
500 g (278 ml) de Base ● 500 g (278 ml) de Catalyseur
● accessoires

941 La boîte **109,00 €**



Coffrets Heavy - Monophase - Light et Extra Light

2 cartouches de 48 ml ● 6 embouts mélangeurs

942	Heavy Normale	■
943	Heavy Rapide	■
944	Heavy Rigid Normale	■
945	Heavy Rigid Rapide	■
946	Monophase Normale	■
947	Monophase Rapide	■
948	Light Normale	■
949	Light Rapide	■
950	Extra Light Normale	■
951	Extra Light Rapide	■

Le coffret **64,00 €**



LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DE
MATÉRIAU
D'EMPREINTE

LES NOUVEAUTÉS 2012

Seringue intra-orale 3M™ ESPE™

Seringue à usage unique à remplir directement à partir d'une cartouche de 50 ml.

Propriétés: Seringue intra-orale pour le mélange automatique des matériaux fluides, permettant un mélange homogène et sans bulle pour des prothèses parfaitement ajustées ainsi qu'un confort du patient amélioré ● Pour les matériaux fluides Polyéther et VPS ● Un excellent confort d'utilisation, facile à remplir, facile à extraire, design ergonomique ● Un dosage personnalisé de la seringue et une distribution plus économique, moins de gaspillage avec un embout mélangeur plus petit ● La seringue peut être préparée à l'avance (jusqu'à 12 h avant) rendant une productivité optimale de la pratique dentaire quotidienne ● Compatibles avec tous les modes de distribution de matériaux fluides en cartouches 50 ml pour empreinte du marché dentaire.

911 Pour Polyéther 2:1 ■

912 Pour VPS 1:1 ■

La boîte de 20 seringues **40,50 €**





HYCAL™ PIERRE ROLLAND

Préparation à base d'hydroxyde de calcium.

1 - INDICATION

HYCAL est une préparation aqueuse à base d'hydroxyde de calcium indiquée pour :

- Maintien d'un pH défavorable à la prolifération bactérienne entre 2 séances de soin.
- Coiffage pulpaire direct ou après pulpotomie.
- Coiffage pulpaire indirect dans les cas de caries profondes.
- Obturation provisoire des canaux radiculaires dont la croissance n'est pas terminée. L'utilisation de ce produit ne présente pas de risque chez l'enfant ou la femme enceinte ou allaitant.

2 - PRÉSENTATION

Etui contenant 1 seringue de 2 ml et 2 canules d'application coudées.

3 - COMPOSITION

Hydroxyde de calcium (45 %), excipients.

4 - CARACTÉRISTIQUES

Produit prêt à l'emploi.

pH élevé (> 12) dû à la présence d'hydroxyde de calcium (45 %), défavorable à la prolifération bactérienne.

Protection efficace de la pulpe.

Favorise la formation de dentine secondaire.

Peut être utilisé sous tous les matériaux d'obturation et de fonds de cavité.

Radio-opaque.

5 - CONTRE-INDICATIONS

Allergie connue à l'hydroxyde de calcium.

Ne pas utiliser pour les obturations définitives.

6 - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser en couches épaisses.

Lors de la mise en place, ménager un espace suffisant pour le fond de cavité.

Ne pas faire avaler.

Tenir hors de portée des enfants.

Xi Irritant.

Irritant pour la peau.

Risque de lésions oculaires graves.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

Nettoyer la seringue avec une lingette désinfectante (SEPTOL LINGETTES par exemple) entre 2 patients.

7 - MODE D'EMPLOI

● ENTRE 2 SÉANCES DE SOIN

Après préparation biomécanique et irrigation canalaire, rincer le canal avec de l'eau distillée ou du sérum physiologique. Sécher le canal. Mettre en place HYCAL à l'aide d'un lentulo en évitant toute surcharge apicale et toute formation de bulles d'air. Mettre en place un ciment d'obturation provisoire coronaire de façon hermétique. A la session suivante, enlever le ciment temporaire et HYCAL (rincer avec NaOCl, EDTA ou eau distillée). Obturer le canal avec un ciment d'obturation définitive selon votre technique habituelle.

● COIFFAGE PULPAIRE DIRECT ET INDIRECT

Préparer et sécher la cavité selon les techniques habituelles. Mettre en place HYCAL directement en bouche, à l'aide de la canule, en couche fine jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée. Laisser sécher brièvement chaque couche ou la sécher avec précaution à l'aide d'une soufflette. Ne pas enduire les bords des cavités et retirer les excédents de produit qui pourraient y coller. Appliquer ensuite un fond de cavité (coiffage pulpaire indirect) (CAV-HYCAL par exemple). Réaliser l'obturation selon les techniques habituelles.

● OBTURATION PROVISOIRE DES CANAUX

Préparer et nettoyer le canal radiculaire selon les techniques habituelles. Mettre en place HYCAL à l'aide d'un lentulo en évitant toute surcharge apicale et toute formation de bulles d'air. Il est recommandé de vérifier le remplissage du canal par radiographie. Renouveler l'obturation de la racine dans un délai de 6 à 8 mois.

8 - CONSERVATION

Bien refermer la seringue après emploi afin d'éviter le durcissement de la pâte.

2 ans à partir de la date de fabrication.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Conserver à une température comprise entre +15 et +23 °C à l'abri de l'humidité.

9 - ELIMINATION

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.

Produit professionnel dentaire.

Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE

Dispositif Médical de classe IIa **CE** 0120

PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND - ZI du Phare - 17 av. G. Eiffel - 33700 MERIGNAC - FRANCE - Tél : + 33 (0) 556 34 06 07

1 seringue de 2 ml ● 2 canules

7.617

La boîte

53,00 €